

DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUELOS Y SUPERFICIES

SURFANIOS Premium

DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUELOS Y SUPERFICIES

Limpieza y desinfección de dispositivos médicos no invasivos antes de su uso y de acuerdo con sus instrucciones de uso.
Biocida: para superficies generales.

- Doble acción: combina la acción detergente y desinfectante en una sola operación.
- Amplio espectro de eficacia en tiempos de contacto cortos.
- Agente quelante fácilmente biodegradable.



ECOLAB®

www.ecolab.com

LABORATOIRES
ANIOS
An Ecolab Company

www.anios.com

SURFANIOS Premium

Detergente desinfectante de suelos y superficies

CARACTERÍSTICAS:

- Solución color verde.
- pH del producto: 10.9
- pH del producto diluido (0.25%): aprox. 8.5
- Densidad a 20°C: 1.009 g/ml
- Índice de refracción: 1.3587

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS


EFICACIA	CONCENTRACIÓN	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida - Conforme a: EN 13727* (5 min 0.25%), EN 16615* (15 min, 0.25%)	0.25 %	15 min
Levaduricida - Conforme a: EN 13624* (15 min, 0.25%), EN 16615* (15 min, 0.25%)	0.25 %	15 min
Tuberculocida - Conforme a EN 14348*	0.50 %	30 min
Eficaz contra virus envueltos conforme a EN 14476*	0.25 %	5 min
Actividad virucida de espectro limitado conforme a EN 14476*	2.0 %	30 min
Adenovirus conforme a EN 14476*	1.0 %	30 min
Norovirus (MNV) conforme a EN 14476*	1.0 % / 2.0 %	60 min / 30 min

*condiciones sucias


MODO DE EMPLEO



1. Llenar un recipiente de lavado y un recipiente de aclarado con 8 litros de agua. Dilución al 0,25% Verter una dosis de 20 ml de SURFANIOS PREMIUM en el recipiente de lavado.

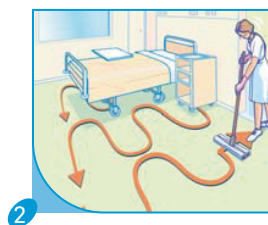

2. Proceder al lavado respetando el esquema de limpieza: desde el fondo hasta la salida. No aclarar la superficie.

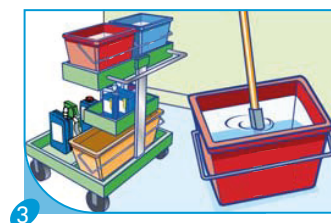

3. Lavar y escurrir la franja antes de el baño en la cubeta. (El transporte de los hogares no es ser colocado en la habitación, pero en el pasillo).



4. Después de limpiar cada sector, cambie la gasa y renueve la solución de lavado y de aclarado. Introduzca las gasas sucias en el recipiente previsto para este fin.

ÁREA DE APLICACIÓN

Detergente desinfectante para pisos y superficies.

Limpieza y desinfección de dispositivos médicos no invasivos antes de su uso y de acuerdo con sus instrucciones de uso.

Biocida: para superficies generales.

INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada.

Diluir el concentrado con agua hasta

alcanzar la concentración deseada.

Para preparar una solución con una concentración del 0,25 % (2,5 mL/L), añada 20 mL de producto por cada 8 litros de agua fría o caliente (máx. +60 °C).

Aplique una cantidad suficiente (aprox. 30 mL/m²).

Respete el tiempo de contacto recomendado para garantizar la actividad antimicrobiana requerida.

Para dispositivos médicos: enjuague abundantemente con agua del grifo para eliminar cualquier residuo del producto.

Para aplicaciones biocidas: no es necesario enjuagar, excepto en las superficies tratadas que entren en contacto con la piel.

Para conocer la frecuencia de uso y el procedimiento de limpieza del equipo de aplicación, consulte el plan de higiene vigente.

La documentación científica (eficacia, compatibilidad, etc.) está disponible bajo solicitud.

INGREDIENTES

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina (CAS n.º 2372-82-9: 51 mg/g), cloruro de didecildimetilamonio (CAS n.º 7173-51-5: 25 mg/g), tensioactivos no iónicos, agentes secuestrantes, colorante, perfume y excipientes.

CERTIFICADOS

Dispositivo médico y biocida.

La actividad antimicrobiana completa de SURFANIOS Premium se encuentra documentada en el expediente científico, disponible bajo solicitud.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre +5°C y +25°C.

PRODUCTO SANITARIO Y BIOCIDA. USAR CON SEGURIDAD

Lea la etiqueta e información del producto.



PARA USO ÚNICO PROFESIONAL.



LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

Distribuido por:

LABORATOIRES ANIOS

1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France



www.ecolab.com



www.anios.com